




**ШТАТИВ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ВЛИВАНИЙ ПЯТИОПОРНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ, НА КОЛЕСАХ С РЕЗИНОВОЙ ШИНОЙ ШВ — 01-«МСК» (5310)
ШТАТИВ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ВЛИВАНИЙ ПЯТИОПОРНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ, БЕЗ КОЛЕС ШВ — 01-«МСК» (5310-01)**

ТУ 9452-006-52962725-2001

РУ № ФСР2011/11511 СС РОСС RU.ИМ02.Н17965

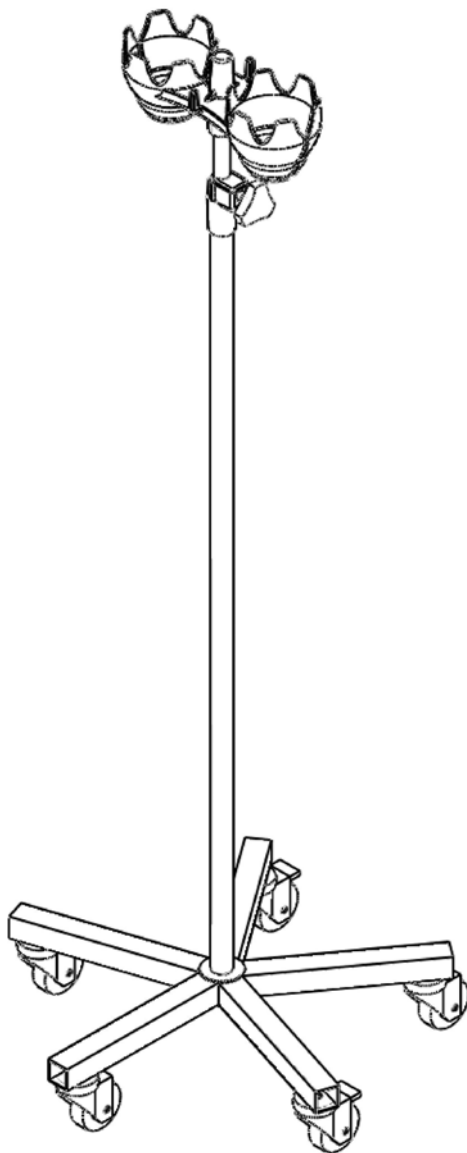

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1 Перед работой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.

7.2 Осуществить сборку согласно инструкции.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Штатив для вливаний не требует специального технического обслуживания. Рекомендуется периодически, 1 раз в 6 месяцев, производить проверку затяжки болтовых соединений и в случае их ослабления, производить их подтяжку.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

9.1 Изделия в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C без конденсации влаги.

9.2 Хранение должно обеспечиваться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие штатива требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

10.2 Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.

10.3 В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Штатив медицинский для вливаний пятипорный из нержавеющей стали _____

Дата выпуска _____ М. П.

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-006-52962725-2001 и признан годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку. _____

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники _____
наименование и тип изделия

Дата выпуска _____

Инструкция по сборке штатива для вливаний пятиопорного из нержавеющей стали

1 С помощью винтов M10x30 и шайб 10 пружинных закрепить колеса на основании (только для 5310).



2. Держатель насадить на стойку с усилием исключая свободный съем его со стойки. С помощью винта M10x30(25) и шайбы 10 пружинной соединить стойку с основанием.

