

ПАСПОРТ**ООО «МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»**

**ТУМБА МЕДИЦИНСКАЯ ТМ- «МСК»: МД-104.00 из набора мебели медицинской
ТУ 9452-037-52962725-2017**

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Тумба медицинская (далее по тексту — тумба) предназначена для хранения личных вещей в палатах для больных, в санаториях, гостиницах, в бытовых условиях, в качестве подкатных к письменному столу.
- 1.2. Тумбы изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Основные параметры и размеры.
- 2.2. Основные параметры и размеры тумб указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение параметров	
	ТМ- «МСК»(МД-104.00)	
1. Габаритные размеры, мм, ±5 мм		
Глубина	450	
Ширина	430	
Высота	660	
2. Масса, кг, не более	30	

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. Комплект поставки тумбы соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование комплектующего	Кол-во, шт.	Размеры, мм
1	Ящик	3	
	Панель лицевая	1	428x190x16
	Боковина	2	390x140x16
	Донышко	1	400x350x3
	Панель задняя	1	372x140x16
2	Дно	1	430x430x16
3	Стенка боковая	2	568x430x16
4	Стенка задняя	1	578x408x3
5	Крышка	1	450x433x16

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Тумба собрана из элементов, выполненных из ламинированного ДСП.
- 4.2. Тумбы представляют собой модульную сборно-разборную конструкцию.
- 4.3. Элементы тумбы закреплены друг относительно друга металлическими эксцентриковыми стяжками и деревянными шкантами.
- 4.4. Тумба подкатная, на мебельных колесах Ø50 мм, имеет три выдвижных ящика.
- 4.5. Ящики тумбы устанавливаются на направляющих.

5. ФУРНИТУРА.

- 5.1. Комплект фурнитуры соответствует указанному в таблице 3.

Таблица 3.

№ поз.	Наименование комплектующего	Кол-во, шт.
1	Стяжка-эксцентрик ТЕ 15 хром	20
2	Шток	20
3	Шкант 8x30	32
5	Ручка-скоба	3
6	Шуруп 2А3-13 ГОСТ 1145-75	42
7	Заглушка эксцентрик	20
8	Колесо мебельное	4
9	Комплект направляющих	3

6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 6.1. После транспортирования тумбы в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать ее в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
- 6.2. Распаковать тумбу и проверить целостность покрытия.
- 6.3. Проверить комплектность.
- 6.4. Осуществить сборку согласно инструкции.
- 6.5. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1. Тумбы имеют простую надежную конструкцию и не требуют специального технического обслуживания.

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 8.1. Тумбы в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C без конденсации влаги.
- 8.2. Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тумб требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технической документации и указанных в настоящем паспорте.
- 9.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.
- 9.3. Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.
- 9.4. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКИ

Тумба медицинская ТМ- «МСК»: МД-104.00 из набора мебели медицинской _____

Дата выпуска _____ М. П.

Соответствует ТУ 9452-037-52962725-2017 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие _____
наименование и тип изделия


Номер и дата выпуска

номер ГОСТ или ТУ

Приобретено _____
дата, подпись, штамп торгующей организации


Производитель: ООО «Медстальконструкция»
Россия, 450024, РБ, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1/1, тел. (347)291-20-81, 292-26-00

Схема сборки тумбы МД-104.00

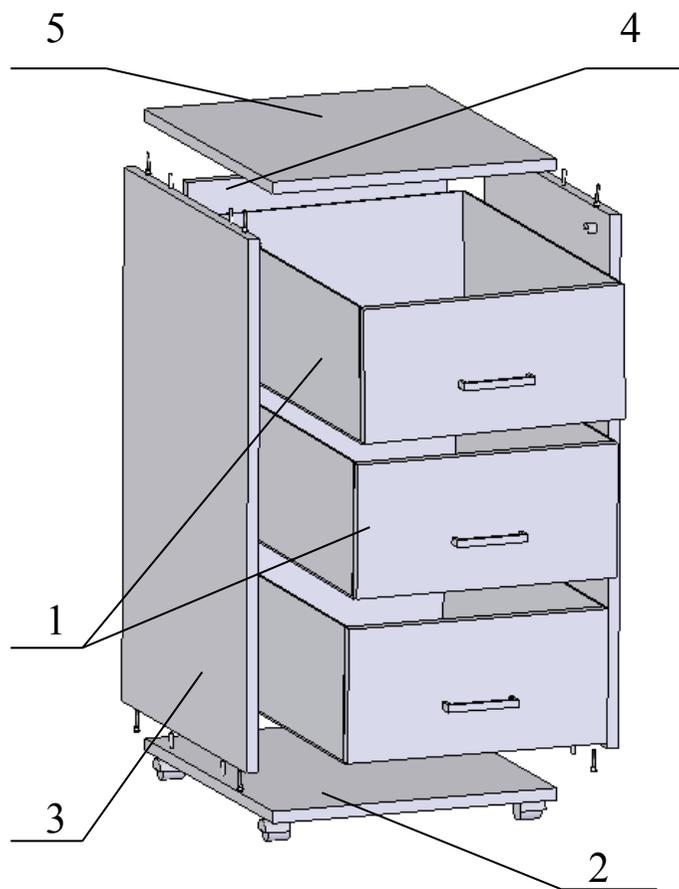


Инструкция по сборке

1. Скрепить при помощи стяжек-эксцентров и шкантов дно (2) с боковыми стенками (3).
2. Прикрепить заднюю стенку (4) с дном (2) и боковыми стенками (3), заведя заднюю стенку (4) в пазы.

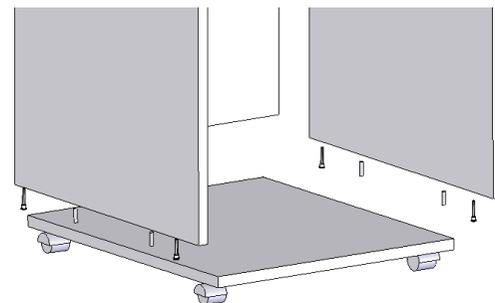


3. При помощи стяжек-эксцентров и шкантов сверху установить крышку (5).

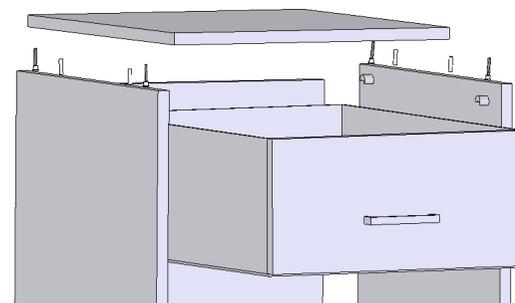


4. К боковинам (3) установить направляющие, используя для этого предусмотренные конструкцией шурупы.
5. Собрать ящики(1) при помощи стяжек-эксцентров и шкантов. Дно ящика завести в паз на боковинах и лицевой панели. Прикрепить направляющие при помощи шурупов.
5. Установить ящики (1).
6. Используя винты на ящики (1) прикрепить ручки, а снизу к дну (2) установить колеса.

Схема сборки тумбы МД-104.00

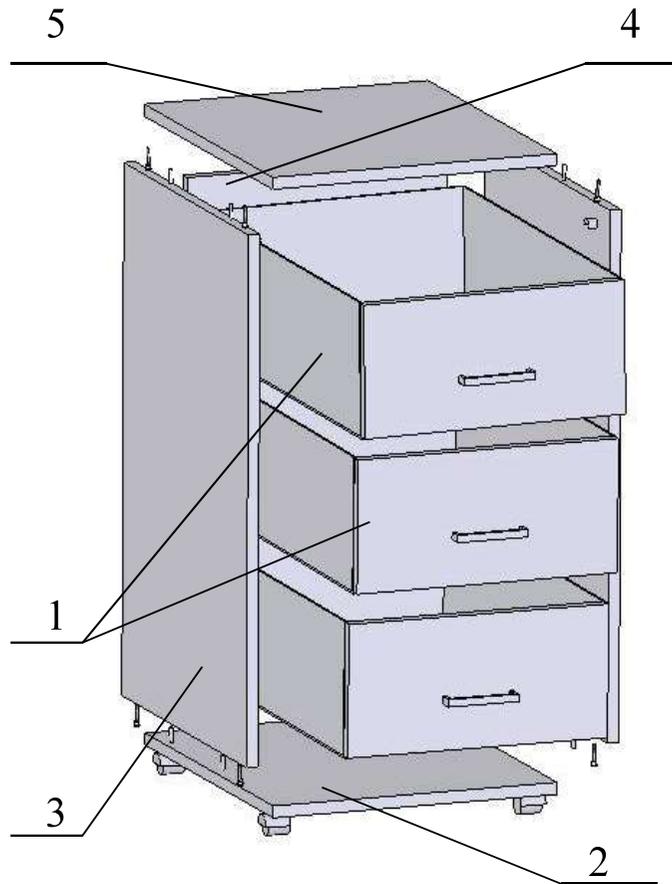


Инструкция по сборке

1. Скрепить при помощи стяжек-эксцентров и шкантов дно (2) с боковыми стенками (3).
2. Прикрепить заднюю стенку (4) с дном (2) и боковыми стенками (3), заведя заднюю стенку (4) в пазы.

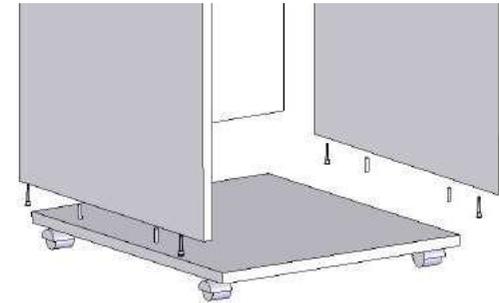

3. При помощи стяжек-эксцентров и шкантов сверху установить крышку (5).

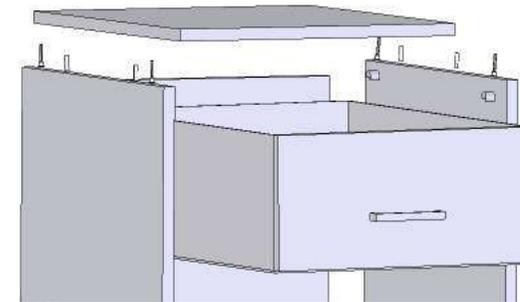

4. К боковинам (3) установить направляющие, используя для этого предусмотренные конструкцией шурупы.
5. Собрать ящики(1) при помощи стяжек-эксцентров и шкантов. Дно ящика завести в паз на боковинах и лицевой панели. Прикрепить направляющие при помощи шурупов.
5. Установить ящики (1).
6. Используя винты на ящики (1) прикрепить ручки, а снизу к дну (2) установить колеса.